



KWIK-STICK

Utilisation en culture et contrôle qualité

- Économique
- Stockage réfrigéré
- Certificat d'analyse en ligne
- Traçabilité
- Garantie produit

DÉTAIL DU PRODUIT KWIK-STICK

KWIK-STICK est reconnu pour son design intelligent et efficace ainsi que ses résultats reproductibles. Chaque KWIK-STICK contient une pastille de microorganisme lyophilisée, un réservoir de fluide de réhydratation et un écouvillon stérile. Pour une plus grande facilité d'utilisation, une étiquette détachable est collée sur l'emballage pour une traçabilité optimale. Le KWIK-STICK est disponible par pack de 2 ou 6 unités.

KWIK-STICK : mode d'emploi

Merci d'ajouter l'option de conditionnement au numéro de catalogue lors de la commande :

P=KWIK-STIK x2, K= KWIK-STIK x6.


Exemple: 0355P, 0355K

1



Déchirer l'emballage

2

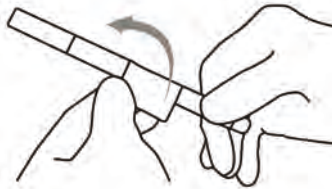


Retirer l'étiquette d'identification et la coller sur le milieu de culture primaire pour le contrôle qualité

3



Pincer (une fois) le haut du KWIK-STIK sur la partie supérieure de l'écouvillon afin de libérer le fluide d'inoculation

4

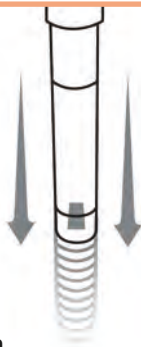

Tenir le KWIK-STICK verticalement pour faciliter la descente du fluide d'inoculation en bas de l'écouvillon, qui contient la pastille

5




Ecraser la pastille & homogénéiser avec le fluide par pincement du culot

6



Saturer immédiatement l'écouvillon de suspension hydratée

7

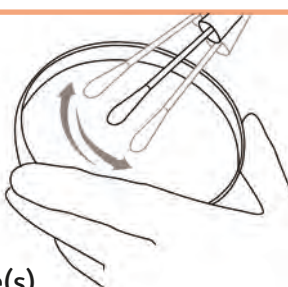

Inoculer le(s) milieu(x) de culture primaire en étalant la suspension avec l'écouvillon sur le premier tiers de la plaque

8



À l'aide d'une anse stérile, étaler la suspension sur le(s) milieu(x) de culture

9

Utiliser un dispositif d'élimination des déchets adaptés

10



Incuber immédiatement le(s) milieu(x) de culture